


Mepitel® Film

Filmové krytí k ochraně kůže

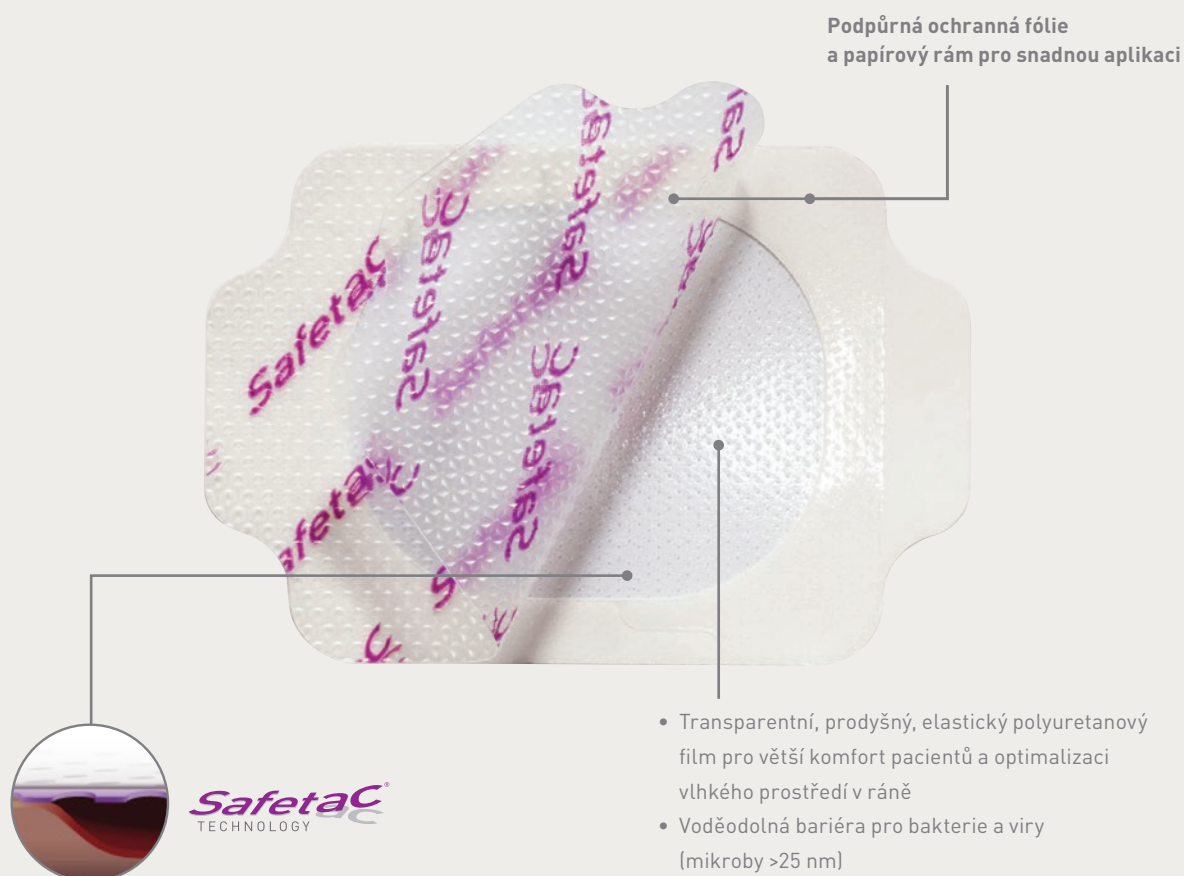

Technologie Safetac®. Méně traumatu. Méně bolesti.™

Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonu. Krytí s technologií Safetac jsou atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také riziku macerace tím, že utěsní okraje rány a nedovolí tak průsaku exsudátu na okolní kůži.



Bez technologie Safetac®



S technologií Safetac®



- Mepitel® Film je jemné transparentní prodyšné krytí určené pro ochranu pokožky. Může být použito samostatně či v kombinaci s jinými výrobky.
- Mepitel® Film minimalizuje bolest a trauma při převazech^{1,2,3,4,5,6}
- Aplikační systém Mepitelu Film je navržen pro maximálně snadné použití.

Jak používat Mepitel® Film



1. Důkladně osušte kůži. Odstraňte ochrannou fólii (s potiskem Safetac®) aby se odkryla adhezivní strana.



2. Umístěte krytí na zvolené místo. Mepitel® Film je možné upravovat/přemísťovat tak dlouho, dokud je papírový rám neporušený. Poté odstraňte papírový rám. Krytí při aplikaci nenapínejte. Pro lepší výsledky a bezpečnou fixaci aplikujte Mepitel® Film s přesahem alespoň 1-2 cm na okolní kůži pro velikosti do 10x12 cm a s přesahem 5 cm pro větší velikosti.



3. Krytí na kůži důkladně vyhladte. Mepitel® Film může být odstraněn aniž by docházelo k bolestivému strhávání kožních buněk.

Jak Mepitel® Film funguje

Mepitel® Film poskytuje flexibilní, transparentní krytí kůže a rány a poskytuje ochranu před bakteriální či jinou kontaminací, průnikem tekutin a zároveň se přizpůsobuje všem tvarům a nepravidelnostem těla. Mepitel® Film udržuje vlhké prostředí v ráně. Přesto umožňuje odvod vodních par a nadbytečné vlhkosti z pokožky. Díky vrstvě Safetac® umožňuje Mepitel® Film okamžitou adhezi a výbornou fixaci bez vyvíjení zbytečného tlaku na pokožku. Vrstva Safetac® také zajišťuje atraumatické a bezbolestné převazy. Mepitel® Film při odstraňování nezanechává zbytky a úroveň adheze zůstává v průběhu času stejná a nezvyšuje se.

Výhody krytí Mepitel® Film

- Minimalizuje bolest a trauma rány
- Zmenšuje riziko poškození nově vytvořené pokožky
- Transparentní pro snadnou kontrolu
- Velmi dobře se přizpůsobí tvarům těla a zajišťuje pacientům komfort během nošení
- Bariéra pro viry a bakterie (větší než 25 nm)
- Velmi nízký potenciál pro podráždění pokožky a alergie
- Nezanechává zbytky
- Voděodolný

Přehled velikostí Mepitelu Film

REF	Kód SÚKL	Velikost cm	Ks v balení	Ks v kartonu
296170	5009751	6 x 7	10	50
296270	5009728	10 x 12	10	70
296470	5009731	10 x 25	10	50
296670	5009733	15 x 20	10	10

Oblasti použití

Mepitel® Film je určen pro širokou škálu povrchových ran jako jsou dekubity I. a II. stupně, povrchové popáleniny a odřeniny. Chrání křehkou a citlivou pokožku. Mepitel® Film může být též použit jako ochranný krytí u otevřených břišních operací. Fixuje primární krytí jako sekundární fixace a může být použit v kombinaci s gely či emoliencii.

Frekvence výměny

Mepitel® Film může být ponechán na ráně několik dnů v závislosti na stavu kůže či rány.

Upozornění

- Mepitel® Film není kontaktní vrstva na ránu a neumožňuje odvod exsudátu do sekundárního krytí
- V případě použití více kusů a jejich překrytí přes sebe se snižuje schopnost odvodu par a může dojít ke zvýšení vlhkosti, která nemůže být odváděna.

Varování

Mepitel® Film nemůže být používán k primární fixaci kanyl, i.v. vstupů, infuzí a jiných přístrojů zajišťujících životní funkce.



REFERENCE 1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008. 2. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005. 3. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Ostomy Wound Management 2003. 4. Wiberg AB et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster publication. WUWHS congress, Canada 2008. 5. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001. 6. Waring M. et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.

Více najdete na www.molnlycke.cz

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3, tel. +420221890511. Mölnlycke Health Care, Mepitel® Film a Safetac® jsou registrované ochranné známky, názvy a loga jedné či více společností skupiny Mölnlycke Health Care Group.
© 2021 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. CZWC0800721

