

Nepřerušované hojení

- Pomáhá snižovat riziko pooperačních komplikací (SSC)¹⁻⁷
- Podporuje brzkou mobilizaci pacienta²⁻⁴
- Snižuje náklady spojené s převazy, a to i ve srovnání s nejlevnějšími tradičními náplastmi^{3,4}


Může zůstat na místě až 14 dní¹

Voděodolné. Bariéra proti mikrobům (do velikosti 25nm)⁵⁻⁷

- Transparentní okraje umožňují kontrolu bez nutnosti odlepení
- Absorbuje a zadrží více tekutin než ostatní podobná krytí na trhu, *in vitro*⁸⁻¹⁰

Klinicky prokázáno, že minimalizuje poškození kůže a bolest související s převazem²⁻⁴

Kontaktní vrstva Safetac® jemně přilne a zachovává integritu pokožky²⁻⁴

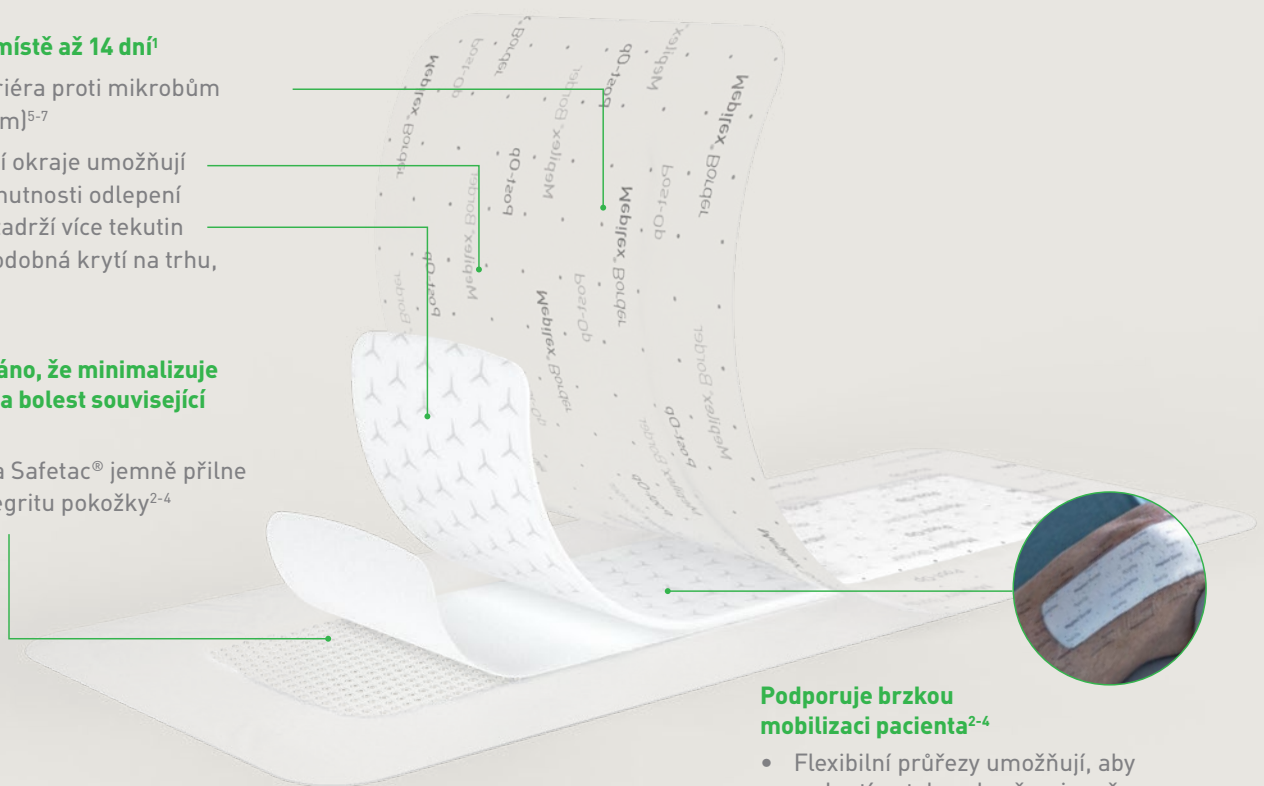

Podporuje brzkou mobilizaci pacienta²⁻⁴

- Flexibilní průřezy umožňují, aby se krytí natahovalo všemi směry a přizpůsobilo se pohybům těla.

Safetac technologie. Méně traumatu. Méně bolesti.

V četných randomizovaných studiích bylo klinicky prokázáno, že krytí se Safetac technologií minimalizují poškození rány a kůže při převazech. Utěsněním okrajů rány pomáhají předcházet maceraci. Díky minimalizaci traumatu rány a okolní kůže je také minimalizována bolest při převazech.

Proto několik randomizovaných studií spojuje převazy s krytím se Safetac technologií s rychlejším hojením a s nižšími celkovými náklady na léčbu.

Jak Mepilex® Border Post-Op funguje

Mepilex Border Post-Op je pooperační krytí "vše v jednom", které účinně absorbuje a zadržuje chirurgický exsudát. Vrstva Safetac minimalizuje bolestivé poškození rány a kůže v okolí rány při převazech²⁻⁴. Vrstva Safetac utěšňuje okraje rány a zabraňuje úniku exsudátu na okolní kůži, čímž se minimalizuje riziko macerace²⁻³. Perforovaný polštářek poskytuje vysokou flexibilitu a velmi dobrou přizpůsobivost v oblastech kloubů (např. kolena nebo kyčle), čímž podporuje brzkou mobilizaci pacienta²⁻⁴.

Frekvence výměny

Mepilex Border Post-Op může být ponechán na místě po dobu až 14 dnů v závislosti na stavu rány a okolní kůže nebo podle zavedené klinické praxe¹.

Výhody krytí Mepilex Border Post-Op

- Minimalizuje poškození kůže²⁻⁴
- Vysoká absorpční kapacita přispívá k menšímu počtu nutných výměn krytí^{1,3,4}
- Podporuje pohodlí pacienta během nošení²⁻⁴
- Lze nadzvednout a upravit bez ztráty přilnavosti
- Široké průhledné okraje pro snadnou kontrolu oblasti rány
- Bakteriální a virová bariéra (mikroby >25nm)^{6,7}
- Nedráždí²⁻⁴
- Voděodolný⁵

Jak používat Mepilex Border Post-Op



1. Otevřete sterilní obal a vyjměte krytí. Před aplikací se ujistěte, že je pokožka čistá a suchá.



2. Odstraňte zcela nebo částečně snímatelnou krycí fólii a přiložte krytí na kůži.



3. Začněte odstraňovat vodící rámečky, jeden po druhém.



4. Dokončete aplikaci uhlazením celého krytí abyste zajistili maximální přilnutí.

Oblasti použití

Mepilex Border Post-Op je samolepicí absorpční chirurgické krytí určené pro secernující rány. Je určeno na akutní rány, jako jsou operační rány, řezné rány a oděrky.


Upozornění

Pokud zjistíte známky infekce, např. horečka nebo rána a okolní kůže jsou zarudlé, oteklé nebo je v místě rány zvýšená teplota, poraďte se s lékařem o vhodné léčbě.

- Před použitím Mepilex Border Post-Op u pacientů s Epidermolysis Bullosa se vždy poraďte s lékařem.
- Krytí Mepilex Border Post-Op nepoužívejte u pacientů nebo uživatelů se známou přecitlivělostí na materiály/složky výrobku.

Sortiment

REF	velikost (cm)	velikost polštářku (cm)	ks v bal	preskripční kód	ZÚM kód
496100	6x8	3x5	10	5010110	0173124
496200	9x10	5x6	10	5010111	0173123
496300	10x15	5x10	10	5010113	0173122
496400	10x20	5x15	10	5010114	0173121
496450	10x25	5x20	10	5010115	0170480
496600	10x30	5x25	10	5010116	0173120
496650	10x35	5x30	5	5010117	0170481

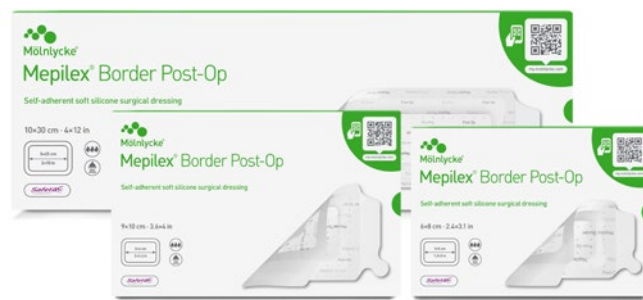

Reference: 1. Van. Overschelde, P. A clinical investigation into undisturbed wound healing in orthopaedic patients post-surgery. Wounds International, 2023. 2. Beele H. et al. A prospective randomized controlled clinical investigation comparing two post-operative wound dressings used after elective hip and knee replacement; Mepilex® Border Post-Op versus Aquacel® Surgical. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2020. 3. Zarghooni K. et al. Is the use of modern versus conventional wound dressings warranted after primary knee and hip arthroplasty? Acta Orthopaedica Belgica, 2015. 4. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018. 5. Mölnlycke Health Care, Data on File internal report 20190215-001. 6. External test at Nelson Laboratories (viral penetration test), Study Report 1064846-S01. 7. Statement towards ASTM F 1671 (viral penetration test), PD-404335. 8. Feili, F. et al. Fluid handling properties of post-operative wound dressings. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 9. Feili, F. et al. Blood absorption capacity of post-operative wound dressings. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 10. Feili F. et al. A laboratory valuation of the fluid retention properties of post-operative absorbent dressings. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016.

Více najdete na www.molnlycke.com nebo na www.osetreniran.cz

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3.
Mölnlycke, Mepilex a Safetac jsou registrované ochranné známky a loga jedné nebo více společností skupiny Mölnlycke Health Care Group. © 2023 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. CZWC1550723

