

ČÁSTI

BladeFLASKu

INDIKÁTOR:
UKAZUJE, KAM MUSÍ
SMĚROVAT OSTRÍ.

TATO ČÁST
SKALPELU SE
NAZÝVÁ
JAYZÝČEK.

POČÍTADLO

PODLOŽKA




MONTÁŽNÍ
SADA


UPEVNĚNÍ KE ZDI NEBO STOLKU

1. Jestliže jste nepřípevnili BladeFLASK, připravte si montážní sadu*.

A SADA MÁ NA DNĚ
OBOUSTRANNOU PÁSKU

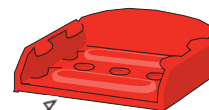

B NEBO POUŽIJTE
ŠROUBKY.

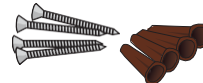

* Přečtěte si návod k použití pro montážní sadu

2. BladeFLASK může být připevněn ke zdi nebo stolu.




ZASUŇTE
DOZADU
DO DRŽÁKU


POZNÁMKA:
BladeFLASK
je připevněn
během použití
montážní sadou.

ODSTRANĚNÍ ČEPELKY ZVLÁDNETE JEDNOU RUKOU:


1. Umístěte čepelku na podložku ostřím doprava (nebo jazýčkem nahoru).

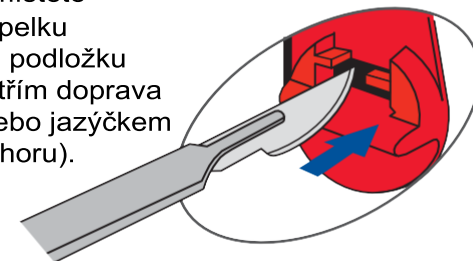

2. Tlačte skalpelovou rukojeť do BladeFLASKu dokud neuslyšíte klik.

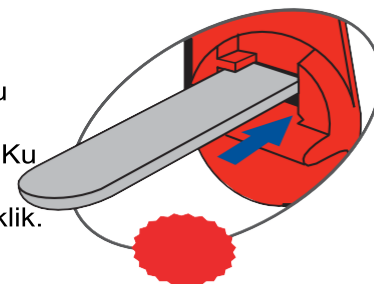

3. Vyjměte rukojeť.

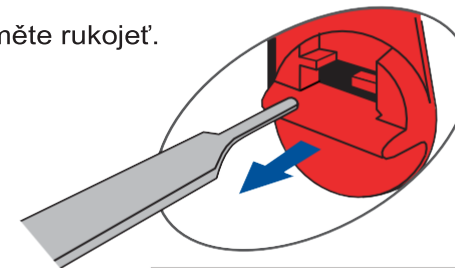

POZNÁMKA: BladeFLASK
zlikvidujte jako nemocniční odpad
po oddělení 100 čepelků.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Nepoužívejte s rukojetmi značky Baron, Beaver ani s jednorázovými rukojetmi.
- Vhodné pro skalpelové rukojeti velikost č. 3, 4, 7 a 9.
- Doporučujeme používat BladeFLASK upevněný montážní sadou Qlicksmart pro použití jednou rukou (prodáváno samostatně).
- BladeFLASK je kontejner na ostré předměty odolný proti propíchnutí.
- Před použitím zkontrolujte, zda není poškozený.
- Po uzavření zlikvidujte BladeFLASK jako zdravotnický odpad nebo jak vyžadováno.
- Pro maximální velikost čepelky 36.
- Pokud se rukojeť sklapelu zasekne, nepokoušejte se ji odstraňovat. Pro další pokyny kontaktujte výrobce.

Po naplnění (100 odstraněných čepelí a aktivovaný uzavírací systém) uchopte kontejner za držák a celý ho zlikvidujte jako nebezpečný odpad.
Nepoukousejte se vyprázdnit obsah nebo jej znovu používat.

Pro objednání nebo detailní Návod k použití navštivte www.qlicksmart.com

Přípustná hrubá hmotnost: přibližně 0,45 kg.



DAHLHAUSEN CZ, spol. s r. o., Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim, tel. 541 422 070, info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz