



# Centra Line™ Sety centrálních žilních katetrů




**Centra Line™**  
Sety centrálních žilních katetrů



## Zaváděcí drát odolný vůči ohnutí

BIOMETRIX nitinolové (odolné vůči ohnutí) zaváděcí dráty jsou navrženy tak, aby vydržely ohýbání pod ostrými úhly a to bez vybočení a stáčení, a tím bylo usnadněno průchodu CŽK do pacientova vaskulárního systému.

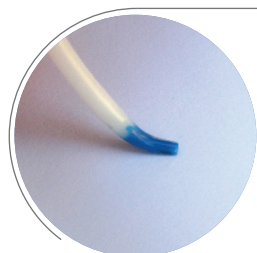


## Flexibilní špička

Flexibilní špička spolu s vysoce kvalitním biokompatibilní materiálem umožňuje bezpečné a snadné zavedení a manipulaci do vaskulárního systému.



## Bezjehlové vstupy

Navržen tak, aby se zabránilo poranění hrotem jehly a ke snížení rizika nákazy infekcí. Svým tvarem umožňuje bezpečný a snadný přístup k pacientovi. Tento vstup může být použit pro jakýkoliv typ luer (male) stříkačky.

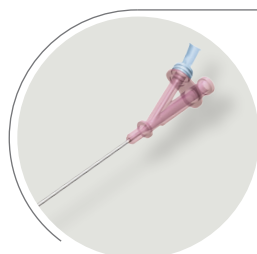

## Y-jehla

BIOMETRIX Y-zaváděcí jehla nabízí jedinečný design, který umožňuje přístup k žíle bez nutnosti odpojení stříkačky připojené k jehle. Y-zaváděcí jehla má jednosměrný integrální ventil pro prevenci rizika úniku krve a embolie během zavádění.



## Stříkačka pro rychlé zavedení

Pomocí této stříkačky může být vodící drát vložen přímo do dutého pístu/válce, a to prostřednictvím zaváděcí jehly a do vaskulárního systému. Stříkačka pro rychlé zavedení je jednodušší a rychlejší pro lékaře, méně traumatické pro pacienta, a také slouží jako omezení úniku tekutiny, což zvyšuje ochranu před nákazou a křížovou kontaminací.

BIOMETRIX nabízí širokou škálu kitů a setů na míru pro centrální žilní katetrizaci. Zajišťujeme bezpečné a spolehlivé produkty pro široké spektrum klinických intervencí. Central-Line™, centrální žilní katetry, umožňují při použití variant více lumen (typ setu 2, 3 nebo 4) zajistit souběžně: monitoring CVP, kontinuální podávání infuzí a léčiv či odběr krve.



## CŽK sety na míru

- volitelné roušky
- operační pláště
- gáza
- tampóny
- hypodermické jehly
- další součásti



Set pro dospělé

4 – lumenný set | Dospělý

| Kód      | Popis         | Y-jehla | Neutron® | Stříkačka pro rychlé zavedení |
|----------|---------------|---------|----------|-------------------------------|
| HH-8515  | 8.5Fr x 15 cm | -       | -        | -                             |
| HH-8520  | 8.5Fr x 20 cm | -       | -        | -                             |
| HH-8530  | 8.5Fr x 30 cm | -       | -        | -                             |
| HH-I8515 | 8.5Fr x 15cm  | +       | -        | -                             |
| HH-I8520 | 8.5Fr x 20 cm | +       | -        | -                             |
| HH-I8530 | 8.5Fr x 30 cm | +       | -        | -                             |
| HH-E8515 | 8.5Fr x 15 cm | +       | +        | -                             |
| HH-E8520 | 8.5Fr x 20 cm | +       | +        | -                             |
| HH-E8530 | 8.5Fr x 30 cm | +       | +        | -                             |
| HH-R8516 | 8.5Fr x 15 cm | -       | +        | +                             |
| HH-R8521 | 8.5Fr x 20 cm | -       | +        | +                             |
| HH-R8531 | 8.5Fr x 30 cm | -       | +        | +                             |

3 – lumenný set | Dospělý

| Kód      | Popis         | Y-jehla | Neutron® | Stříkačka pro rychlé zavedení |
|----------|---------------|---------|----------|-------------------------------|
| HJ-7015  | 7Fr x 15 cm   | -       | -        | -                             |
| HJ-7020  | 7Fr x 20 cm   | -       | -        | -                             |
| HJ-7030  | 7Fr x 30 cm   | -       | -        | -                             |
| HJ-I7015 | 7Fr x 15 cm   | +       | -        | -                             |
| HJ-I7020 | 7Fr x 20 cm   | +       | -        | -                             |
| HJ-I7030 | 7Fr x 30 cm   | +       | -        | -                             |
| HJ-E7015 | 7Fr x 15 cm   | +       | +        | -                             |
| HJ-E7020 | 7Fr x 20 cm   | +       | +        | -                             |
| HJ-E7030 | 7Fr x 30 cm   | +       | +        | -                             |
| HJ-R7016 | 7Fr x 15 cm   | -       | +        | +                             |
| HJ-R7021 | 7Fr x 20 cm   | -       | +        | +                             |
| HJ-R7031 | 7Fr x 30 cm   | -       | +        | +                             |
| HJ-R8516 | 8.5Fr x 15 cm | -       | +        | +                             |
| HJ-R8521 | 8.5Fr x 20 cm | -       | +        | +                             |

2 – lumenný set | Dospělý

| Kód      | Popis       | Y-jehla | Neutron® | Stříkačka pro rychlé zavedení |
|----------|-------------|---------|----------|-------------------------------|
| HK-7015  | 7Fr x 15 cm | -       | -        | -                             |
| HK-7020  | 7Fr x 20 cm | -       | -        | -                             |
| HK-7030  | 7Fr x 30 cm | -       | -        | -                             |
| HK-E7015 | 7Fr x 15 cm | +       | +        | -                             |
| HK-E7020 | 7Fr x 20 cm | +       | +        | -                             |
| HK-E7030 | 7Fr x 30 cm | +       | +        | -                             |
| HK-R7016 | 7Fr x 15 cm | -       | +        | +                             |
| HK-R7021 | 7Fr x 20 cm | -       | +        | +                             |
| HK-R7031 | 7Fr x 30 cm | -       | +        | +                             |

1 – lumenný set | Dospělý

| Kód      | Description  | Y-jehla | Neutron® | Stříkačka pro rychlé zavedení |
|----------|--------------|---------|----------|-------------------------------|
| HO-4015  | 14Ga x 15 cm | -       | -        | -                             |
| HO-4020  | 14Ga x 20 cm | -       | -        | -                             |
| HO-4030  | 14Ga x 30 cm | -       | -        | -                             |
| HO-6015  | 16Ga x 15 cm | -       | -        | -                             |
| HO-6020  | 16Ga x 20 cm | -       | -        | -                             |
| HO-6030  | 16Ga x 30 cm | -       | -        | -                             |
| HO-8015  | 18Ga x 15 cm | -       | -        | -                             |
| HO-8020  | 18Ga x 20 cm | -       | -        | -                             |
| HO-I4015 | 14Ga x 15 cm | +       | -        | -                             |
| HO-I4020 | 14Ga x 20 cm | +       | -        | -                             |
| HO-I4030 | 14Ga x 30 cm | +       | -        | -                             |
| HO-I6015 | 16Ga x 15 cm | +       | -        | -                             |
| HO-I6020 | 16Ga x 20 cm | +       | -        | -                             |
| HO-I6030 | 16Ga x 30 cm | +       | -        | -                             |
| HO-E4015 | 14Ga x 15 cm | +       | +        | -                             |
| HO-E4020 | 14Ga x 20 cm | +       | +        | -                             |
| HO-E4030 | 14Ga x 30 cm | +       | +        | -                             |
| HO-E6015 | 16Ga x 15 cm | +       | +        | -                             |
| HO-E6020 | 16Ga x 20 cm | +       | +        | -                             |
| HO-E6030 | 16Ga x 30 cm | +       | +        | -                             |
| HO-R4016 | 14Ga x 15 cm | -       | -        | +                             |
| HO-R4021 | 14Ga x 20 cm | -       | -        | +                             |
| HO-R4031 | 14Ga x 30 cm | -       | -        | +                             |
| HO-R6016 | 16Ga x 15 cm | -       | -        | +                             |
| HO-R6021 | 16Ga x 20 cm | -       | -        | +                             |
| HO-R6031 | 16Ga x 30 cm | -       | -        | +                             |

Dětské sety

3 – lumenný set | Dětský

| Kód       | Popis         | Neutron® | Stříkačka pro rychlé zavedení |
|-----------|---------------|----------|-------------------------------|
| HJ-5008   | 5.5Fr x 8 cm  | -        | -                             |
| HJ-5013   | 5.5Fr x 13 cm | -        | -                             |
| HJ-5030   | 5.5Fr x 30 cm | -        | -                             |
| HJ-E5008  | 5.5Fr x 8 cm  | +        | -                             |
| HJ-E5013  | 5.5Fr x 13 cm | +        | -                             |
| HJ-E5030  | 5.5Fr x 30 cm | +        | -                             |
| HJ-R5008* | 5.5Fr x 8 cm  | +        | +                             |
| HJ-R5013* | 5.5Fr x 13 cm | +        | +                             |

\* Obsahuje nitinolový zavaděč

2 – lumenný set | Dětský

| Kód       | Popis       | Neutron® | Stříkačka pro rychlé zavedení |
|-----------|-------------|----------|-------------------------------|
| HK-4005   | 4Fr x 5 cm  | -        | -                             |
| HK-4008   | 4Fr x 8 cm  | -        | -                             |
| HK-4013   | 4Fr x 13 cm | -        | -                             |
| HK-4030   | 4Fr x 30 cm | -        | -                             |
| HK-5006   | 5Fr x 6 cm  | -        | -                             |
| HK-5008   | 5Fr x 8 cm  | -        | -                             |
| HK-5013   | 5Fr x 13 cm | -        | -                             |
| HK-5020   | 5Fr x 20 cm | -        | -                             |
| HK-E4005  | 4Fr x 5 cm  | +        | -                             |
| HK-E4008  | 4Fr x 8 cm  | +        | -                             |
| HK-E4013  | 4Fr x 13 cm | +        | -                             |
| HK-E5006  | 5Fr x 6 cm  | +        | -                             |
| HK-E5008  | 5Fr x 8 cm  | +        | -                             |
| HK-E5013  | 5Fr x 13 cm | +        | -                             |
| HK-R4005* | 4Fr x 5 cm  | +        | +                             |
| HK-R4008* | 4Fr x 8 cm  | +        | +                             |
| HK-R4013* | 4Fr x 13 cm | +        | +                             |
| HK-R5006* | 5Fr x 6 cm  | +        | +                             |
| HK-R5008* | 5Fr x 8 cm  | +        | +                             |
| HK-R5013* | 5Fr x 13 cm | +        | +                             |

\*Obsahuje nitinolový zavaděč

1 – lumenný set | Dětský

| Kód       | Popis        | Neutron® | Stříkačka pro rychlé zavedení |
|-----------|--------------|----------|-------------------------------|
| HO-9010   | 20Ga x 10 cm | -        | -                             |
| HO-9013   | 20Ga x 13 cm | -        | -                             |
| HO-9015   | 20Ga x 15 cm | -        | -                             |
| HO-9020   | 20Ga x 20 cm | -        | -                             |
| HO-7008   | 24Ga x 8 cm  | -        | -                             |
| HO-7015   | 24Ga x 15 cm | -        | -                             |
| HO-7020   | 24Ga x 20 cm | -        | -                             |
| HO-R7008* | 24Ga x 8 cm  | +        | +                             |
| HO-R7016* | 24Ga x 15 cm | +        | +                             |

\* Obsahuje nitinolový zavaděč

Hublessův katetr

1 – lumenný set

| Kód     | Popis                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------|
| HG-4015 | Hubless 14GA Single Lumen Catheter Sets, 14Ga x 15 cm |
| HG-4020 | Hubless 14GA Single Lumen Catheter Sets, 14Ga x 20 cm |
| HG-4030 | Hubless 14GA Single Lumen Catheter Sets, 14Ga x 30 cm |
| HG-6015 | Hubless 14GA Single Lumen Catheter Sets, 16Ga x 15 cm |
| HG-6020 | Hubless 14GA Single Lumen Catheter Sets, 16Ga x 20 cm |
| HG-6030 | Hubless 14GA Single Lumen Catheter Sets, 16Ga x 30 cm |
| HG-8015 | Hubless 14GA Single Lumen Catheter Sets, 18Ga x 15 cm |
| HG-8020 | Hubless 14GA Single Lumen Catheter Sets, 18Ga x 20 cm |
| HG-8030 | Hubless 14GA Single Lumen Catheter Sets, 18Ga x 30 cm |

Set obsahuje:

- rentgenokonstrastní PU katetr
- zavaděč
- zaváděcí jehlu/ Y-jehlu zaváděcí
- 5ml stříkačku/stříkačku pro rychlé zavedení
- Vessel dilator
- heparinový zámek/bezjehlové vstupy
- skalpel



Množství v boxu: set pro dospělé 20 ks / pro děti 10 ks